



# GUIDE DE L'UTILISATEUR

QE | Détecteurs d'énergie

121-105148

**gentec-ε**  
PARTENARIAT de PRÉCISION

## GARANTIE

### Garantie de la première année

Les détecteurs d'énergie et de puissance thermiques de Gentec-EO sont garantis contre tout vice de fabrication et de main-d'œuvre pour une durée d'un an à compter de la date d'expédition, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales. La garantie ne couvre pas les dommages liés au réétalonnage ou à une mauvaise utilisation.

Gentec-EO Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout wattmètre ou joulemètre qui présente un défaut pendant la période de garantie, excepté dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit.

Toute modification ou réparation non autorisée du produit n'est également pas couverte par la garantie.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, de quelque nature que ce soit.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le distributeur Gentec-EO local ou le bureau de Gentec-EO Inc. le plus près, afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Retournez le matériel à l'adresse indiquée ci-dessous.

#### Tous les clients :

Gentec-EO, Inc.  
445, St-Jean-Baptiste, bureau 160  
Québec, QC, G2E 5N7  
Canada

Téléphone : (418) 651-8003  
Télécopieur : (418) 651-1174  
Courriel : [service@gentec-eo.com](mailto:service@gentec-eo.com)  
Site Web : [www.gentec-eo.com](http://www.gentec-eo.com)

### Garantie à vie

Gentec-EO garantira tout détecteur de puissance et d'énergie thermique pendant sa durée utile pour autant que le dispositif ait été retourné pour réétalonnage, chaque année, à partir de la date d'expédition. Cette garantie comprend les pièces et la main-d'œuvre pour toutes les réparations, y compris l'usure normale dans des conditions d'utilisation normales.

Gentec-EO inspectera et réparera le détecteur lors du réétalonnage annuel. Gentec-EO évaluera les exceptions à la réparation à d'autres moments.

Le coût du réétalonnage annuel ou de réparation des dommages consécutifs à l'utilisation du détecteur n'est pas inclus.

Toutefois, le détecteur ne doit pas avoir fait l'objet d'un service non autorisé ou subi des dommages attribuables à une mauvaise utilisation. La mauvaise utilisation peut comprendre, sans y être limitée, l'exposition au laser hors des spécifications publiées par Gentec-EO, les dommages physiques attribuables à une mauvaise manipulation et l'exposition à des environnements hostiles. On entend par environnements hostiles, notamment sans y être limité, une température excessive, la vibration, l'humidité (>80 %) ou les contaminants de surface; l'exposition aux flammes, aux solvants et à l'eau et le raccordement à une tension électrique inadéquate.

## TABLE DES MATIÈRES

|   |           |
|---|-----------|
| GARANTIE .....  | I         |
| TABLE DES MATIÈRES .....  | II        |
| LISTE DES ILLUSTRATIONS.....  | III       |
| <b>1</b> <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1.. INTRODUCTION  | 1         |
| 1.2.. CONNECTEUR À « INTERFACE INTELLIGENTE » DE LA SÉRIE QE  | 2         |
| 1.3.. CONNECTEUR USB INTEGRA  | 3         |
| 1.4.. SPÉCIFICATIONS  | 4         |
| 1.4.1 .... SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE MB  | 5         |
| 1.4.2 .... SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE MT  | 10        |
| 1.4.3 .... SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE QE8   | 14        |
| 1.4.4 .... SPÉCIFICATIONS POUR LES QE4-BL ET XLE4   | 15        |
| <b>2</b> <b>DIRECTIVES D'UTILISATION</b>  | <b>17</b> |
| 2.1.. UTILISATION AVEC UN MONITEUR COMPATIBLE   | 17        |
| 2.1.1 .... DIRECTIVES GÉNÉRALES   | 17        |
| 2.1.2 .... MESURES À DES LONGUEURS D'ONDE AUTRES QUE 1,064µM (À L'EXCEPTION DE L'ATTÉNUATEUR / DIFFUSEUR QED) | 18        |
| 2.1.3 .... UTILISATION AVEC UN ATTÉNUATEUR / DIFFUSEUR QED.   | 19        |
| 2.2.. LORS DE L'UTILISATION D'UN OSCILLOSCOPE :   | 19        |
| 2.2.1 .... DIRECTIVES GÉNÉRALES   | 19        |
| 2.2.2 .... UTILISATION À DES LONGUEURS D'ONDE AUTRES QUE 1,064 µM   | 20        |
| <b>3</b> <b>DOMMAGES A L'ABSORBEUR OPTIQUE</b>  | <b>22</b> |
| <b>4</b> <b>ACCESSOIRES EN OPTION</b>   | <b>24</b> |
| 4.1.. ATTÉNUATEUR / DIFFUSEUR QED   | 24        |
| 4.2.. AUTRES ACCESSOIRES :  | 24        |
| <b>5</b> <b>ANNEXE A</b>  | <b>25</b> |
| 5.1.. QED-12, QED-25, QED-50, QED-65, QED-95  | 25        |
| <b>6</b> <b>ANNEXE B</b>  | <b>27</b> |
| 6.1.. PROCÉDURE DE RECYCLAGE ET DE TRI POUR LA DIRECTIVE WEEE 2002/96/CE                                      | 27        |
| 6.2.. TRI :   | 27        |
| <b>7</b> <b>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b>   | <b>28</b> |

## LISTE DES ILLUSTRATIONS

|  |    |
|--|----|
| Fig. 1-1 Brochage de sortie du connecteur à « interface intelligente » DB-15 ..... | 3  |
| Fig. 2-1 Installation du joulemètre .....  | 22 |
| Fig. 4-1 Spécifications de l'atténuateur QED.....                                  | 25 |

# 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 INTRODUCTION

La série QE de Gentec-EO est constituée joulemètres pyroélectriques à haut rendement et haute précision. Chaque unité modulaire est conçue pour être durable, compacte et facile à utiliser.

L'absorbeur optique QE présente des seuils élevés de dommage et peut fonctionner à de hauts taux de répétition. La série QE peut être employée à des niveaux d'énergie plus élevés lorsque combinée à l'atténuateur/diffuseur QED.

La série QE tire profit du connecteur mâle DB-15, un connecteur à interface intelligente, comportant une mémoire EEPROM (Erasable Electrical Programmable Read-Only Memory) programmée selon la sensibilité d'étalonnage, les facteurs de correction spectrale à différentes longueurs d'onde et d'autres données associées au joulemètre de la série QE. Le connecteur permet au moniteur d'ajuster automatiquement les caractéristiques du joulemètre raccordé.

La version C0 de la série QE (avec le connecteur BNC) n'offre pas la fonction d'interface intelligente. Ces joulemètres ne peuvent pas être jumelés à un moniteur. Ils doivent être utilisés avec un oscilloscope ou un système d'acquisition OEM.

Tous les appareils de la série QE sont également offerts avec le connecteur USB INTEGRA. Cette option ne nécessite qu'un ordinateur ou une tablette exécutant le logiciel PC-GENTEC-EO. Il offre également une interface intelligente programmée selon la sensibilité d'étalonnage, les facteurs de correction spectrale à différentes longueurs d'onde et d'autres données associées à au joulemètre spécifique de la série QE.

Chaque joulemètre de la série QE présente une sensibilité intrinsèque élevée et une insensibilité élevée aux interférences électromagnétiques.

La série QE offre également une plage dynamique exceptionnellement vaste et permet des mesures d'énergie allant des UV à l'IR lointain.

Les joulemètres de la série QE sont conçus pour permettre des mesures conviviales de l'énergie des lasers pulsés au moyen d'un moniteur.

Les joulemètres de la série QE n'ont pas besoin de source d'alimentation indépendante. Ils peuvent également être jumelés à des oscilloscopes<sup>1</sup> ayant une impédance d'entrée de  $1\text{ M}\Omega^2$ . La sensibilité étalonnée en V/J est documentée dans le certificat d'étalonnage de chaque unité. La correction spectrale de cette sensibilité est également documentée dans le certificat Certificat de corrections personnalisées de la longueur d'onde.

Chaque détecteur<sup>3</sup> est également assorti d'un support optique standard et d'un pied. Une cible d'essai de dommage appropriée est fournie, par précaution de sécurité, pour tous les modèles QE.

---

<sup>1</sup> Un adaptateur DB-15 à BNC est requis.

<sup>2</sup> La capacité du câble reliant le joulemètre à l'impédance d'entrée de l'instrument de lecture (capacité et résistance) constitue la charge d'impédance totale vue par le détecteur. La capacité de charge totale, excluant le câble intégral devrait être  $\leq 30\text{ pF}$ .

<sup>3</sup> Pour la version C0, le support est facultatif.

## Série QE

Les appareils de la série QE sont des détecteurs modulaires à profil mince, conçues pour être faciles à installer dans les configurations optiques étroites.

Ces détecteurs présentent une ouverture carrée, offrant une meilleure compatibilité avec les profils de faisceau rectangulaire, comme les lasers à gaz pulsés.

Une fixation en coin permet une installation en diagonale des détecteurs pour accommoder les faisceaux rectangulaires plus longs.

Ces détecteurs peuvent être utilisés avec un diffuseur thermique à ailettes optionnel pour étendre la plage de puissance.

La série QE peut aussi être utilisée avec l'atténuateur/diffuseur<sup>4</sup> optionnel pour obtenir une compatibilité améliorée avec les lasers à haute énergie.

## Série QE-QED

Les appareils de la série QE-QED sont étalonnés avec l'atténuateur QED installé. Ils peuvent être utilisés pour l'échelle de 0,3 à 2,1  $\mu\text{m}$ , mais ne peuvent pas être utilisés sans l'atténuateur.

## 1.2 CONNECTEUR À « INTERFACE INTELLIGENTE » DE LA SÉRIE QE <sup>5</sup>

Le connecteur mâle DB-15 à « interface intelligente » comporte une mémoire EEPROM (Erasable Electrical Programmable Read-Only Memory) programmée selon la sensibilité d'étalonnage et les autres données associées au joulemètre QE spécifique utilisé. L'installation est plus rapide parce que le moniteur s'ajuste automatiquement aux caractéristiques du joulemètre, lorsque l'interface intelligente est connectée au joulemètre. Le câble a une longueur de 3 pieds.

Le brochage de sortie du connecteur DB-15 à « interface intelligente » est présenté à la figure 1-1 :

|     |  |
|-----|--|
| 1-  | UTILISÉ PAR LES MONITEURS                  |
| 2-  | " " " "                                    |
| 3-  | " " " "                                    |
| 4-  | " " " "                                    |
| 5-  | " " " "                                    |
| 6-  | « + » SORTIE DU SIGNAL                     |
| 7-  | « - » TENSION D'ALIMENTATION QE8 SEULEMENT |
| 8-  | UTILISÉ PAR LES MONITEURS                  |
| 9-  | « + » TENSION D'ALIMENTATION QE8 SEULEMENT |
| 10- | UTILISÉ PAR LES MONITEURS                  |
| 11- | " " " "                                    |
| 12- | " " " "                                    |
| 13- | « - » SORTIE DU SIGNAL                     |
| 14- | UTILISÉ PAR LES MONITEURS                  |
| 15- | " " " "                                    |

BOÎTIER BLINDAGE COAXIAL / MISE À LA TERRE

<sup>4</sup> Consultez la section des accessoires en option.

<sup>5</sup> Ne concerne pas la version C0.

**REMARQUE : Consultez Gentec-EO pour obtenir les conditions de tension d'alimentation.**

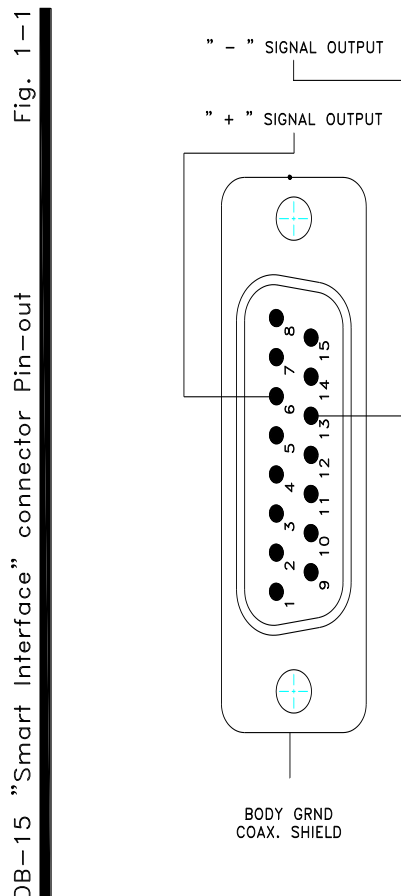


Fig. 1-1 Brochage de sortie du connecteur à « interface intelligente » DB-15

### 1.3 Connecteur USB Integra

Le connecteur USB Integra est un moniteur intégré qui permet de brancher le détecteur directement à un ordinateur. Il y a les mêmes commandes série que le MAESTRO ainsi quelques autres supplémentaires (voir le guide PC-Gentec-EO) et utilise le même logiciel PC-Gentec-EO. Toutes les spécifications sont les mêmes. Le câble a une longueur de 6 pieds.

## 1.4 SPÉCIFICATIONS

Les spécifications suivantes sont basées sur une période d'étalonnage d'un an, à une température de fonctionnement de 15 à 28 °C et une humidité relative maximale de 80 %. Les appareils doivent être entreposés à une température de 5 à 45 °C et une humidité relative maximale de 80 %.

### EXPLICATIONS DES REMARQUES :

1. Voir le certificat Certificat de corrections personnalisées de la longueur d'onde. L'étalonnage 2,1 à 2,5 et 10,6  $\mu\text{m}$  est fait sur demande spéciale seulement. Une référence traçable à 250 nm permet d'obtenir la traçabilité à 248 nm puisqu'à 248 nm le spectromètre a une largeur de bande spectrale de 4 nm.
2. La capacité de charge doit être  $\leq 30$  pF, à l'exception du câble coaxial BNC à DB-15 à interface intelligente ( $\leq 13$  pF pour le QE4).
3. Avec une densité d'énergie maximale à 1,064  $\mu\text{m}$ , un faisceau laser de 7 ns; avec une distribution d'énergie uniforme; énergie appliquée à une pleine ouverture. L'augmentation de la largeur d'impulsion augmente l'énergie mesurable maximale.
4. À puissance constante.
5. Étalonnée à 1,064  $\mu\text{m}$ , 10 Hz, profil de faisceau semi-gaussien, énergie appliquée à 80 % de l'ouverture, chargée dans 1 M $\Omega$  / 30 pF, le niveau d'énergie et la largeur d'impulsion varient selon la spécification du détecteur.
6. Pour la longueur d'onde étalonnée seulement :
  - a. ajouter  $\pm 1$  % de 0,3 à 2.1  $\mu\text{m}$ ;
  - b. ajouter  $\pm 2$  % de 0,248 à 0,3  $\mu\text{m}$ ;
  - c. ajouter  $\pm 1,5$  % pour la série QE-QED de 300 à 2 100 nm.
7. Exclut les non-linéarités.
8. Durée à la base de l'impulsion. Diviser par 2 pour une durée LTMH (largeur totale à mi-hauteur).
9. Chargé dans 1 M $\Omega$  / 30 pF (13 pF pour le QE4).
10. L'énergie mesurable maximale, la densité d'énergie maximale et la puissance moyenne maximale peuvent être augmentées au moyen d'un atténuateur / diffuseur QED optionnel.
11. Avertissement : le boîtier du détecteur peut atteindre 60°C aux puissances maximales.
12. Les détecteurs ayant le revêtement MT peuvent être utilisés dans la plage de 0,19 à 20  $\mu\text{m}$ ; toutefois, l'absorption dans les longueurs d'onde IR diminue significativement. Ainsi, la sensibilité est réduite et le niveau de bruit augmente.
13. Pour les valeurs autres que la longueur d'onde d'étalonnage, une valeur typique est recommandée mais non traçable NIST.
14. Un ordinateur performant est nécessaire pour faire fonctionner le logiciel PC-M-LINK à des taux de répétition élevés. La spécification du taux de répétition est donnée à l'aide d'un ordinateur suffisamment performant.
15. M-LINK peut mesurer des impulsions jusqu'à 6000 Hz avec des commandes série.

### 1.4.1 Spécifications de la série MB

|  | Remarques        | Modèle  |             |
|--|------------------|---|-------------|
|  |                  | QE12LP-S-MB   | QE12LP-H-MB |
| Absorbeur optique  |                  | MB  |             |
| Gamme spectrale (QE)<br>(QE-QED)   |                  | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0.266 – 2.1 $\mu\text{m}$  |             |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)  | 1                | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$ , 10,6 $\mu\text{m}$<br>0.532 – 2.1 $\mu\text{m}$  |             |
| Sensibilité typique  | 2, 9             | 60 V/J  |             |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6,<br>7, 9 | $\pm 3\%$   |             |
| Répétabilité   |                  | < 0,5 %   |             |
| Énergie d'impulsion max. 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11         | 0,85 J<br>0,7 J<br>3,9 J<br>0,81 J  |             |
| Bruit équivalent en énergie (NEE) (Typique)  | 2, 9             | 0,7 $\mu\text{J}$   |             |
| Taux de Répétition max.  | 2, 4, 9          | 300 Hz  |             |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)  | 2, 9             | 550 $\mu\text{s}$   |             |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 8, 9          | 400 $\mu\text{s}$   |             |
| Densité d'énergie maximale   | 10               | 600 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>500 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz  |             |
| Densité d'énergie maximale avec QED  |                  | 16 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 1 impulsion<br>8 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>6 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>1 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |             |
| Puissance moyenne max.<br>Décteur seul (QE12xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12xP-H-MB) :                              | 11               | 3 W (7,5 W avec QED)<br>5 W (12,5 W avec QED)   |             |
| Densité de puissance max.<br>Décteur seul (QE12xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12xP-H-MB) :<br>Avec QED :             |                  | 10 W/cm <sup>2</sup> à 3 W<br>10 W/cm <sup>2</sup> à 5 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>   |             |
| Dimensions (H x L x P)<br>Décteur seul (QE12xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12xP-H-MB) :                              |                  | 36 x 36 x 14 mm<br>36 x 36 x 33 mm  |             |
| Poids : Décteur seul (QE12xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12xP-H-MB) :  |                  | 87 g<br>117 g   |             |
| Taille de l'ouverture<br>QE 12 :<br>QED 12 :   |                  | 12 x 12 mm<br>9 x 9 mm  |             |
| Superficie de l'ouverture<br>QE 12 :<br>QED 12 :   |                  | 1,4 cm <sup>2</sup><br>0,81 cm <sup>2</sup>   |             |



|  | Remarques        | Modèle   |                            |
|--|------------------|--|----------------------------|
|  |                  | QE25SP-S-MB<br>QE25SP-H-MB   | QE25LP-S-MB<br>QE25LP-H-MB |
| Absorbeur optique  |                  | MB   |                            |
| Gamme spectrale (QE)<br>(QE-QED)   |                  | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0,266 – 2,1 $\mu\text{m}$   |                            |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)  | 1                | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$ , 10,6 $\mu\text{m}$<br>0,308 à 2,1 $\mu\text{m}$   |                            |
| Sensibilité typique  | 2, 9             | 10 V/J   |                            |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6,<br>7, 9 | $\pm 3\%$  |                            |
| Répétabilité   |                  | < 0,5 %  |                            |
| Énergie d'impulsion max. 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11         | 3,75 J<br>3,1 J<br>23 J<br>4,8 J   |                            |
| Bruit équivalent en énergie (NEE) (Typique)  | 2, 9             | 4 $\mu\text{J}$  |                            |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9          | 800 Hz   | 300 Hz                     |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)  | 2, 9             | 200 $\mu\text{s}$  | 550 $\mu\text{s}$          |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 8, 9          | 150 $\mu\text{s}$  | 400 $\mu\text{s}$          |
| Densité d'énergie maximale   | 10               | 600 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>500 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz   |                            |
| Densité d'énergie maximale avec QED  |                  | 16 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 1<br>impulsion<br>8 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>6 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>1 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |                            |
| Puissance moyenne max.<br>Décteur seul (QE25xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25xP-H-MB) :                              | 11               | 5 W (15 W avec QED)<br>10 W (30 W avec QED)  |                            |
| Densité de puissance max.<br>Décteur seul (QE25xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25xP-H-MB) :<br>Avec QED :             |                  | 10 W/cm <sup>2</sup> à 5 W<br>10 W/cm <sup>2</sup> à 10 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>   |                            |
| Dimensions (H x L x P)<br>Décteur seul (QE25xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25xP-H-MB) :                              |                  | 50 x 50 x 14 mm<br>50 x 50 x 52,5 mm   |                            |
| Poids<br>Décteur seul (QE25xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25xP-H-MB) :   |                  | 120 g<br>187 g   |                            |
| Taille de l'ouverture<br>QE 25 :<br>QED 25 :   |                  | 25 x 25 mm<br>22 x 22 mm   |                            |
| Superficie de l'ouverture<br>QE 25 :<br>QED 25 :   |                  | 6,25 cm <sup>2</sup><br>4,84 cm <sup>2</sup>   |                            |

|  | Remarques     | Modèle  |                              |
|--|---------------|---|------------------------------|
|  |               | QE50SP-S-MB<br>QE50SP-H-MB  | QE50LP-S-MB<br>QE50LP-H-MB   |
| Absorbeur optique  |               | MB  |                              |
| Gamme spectrale (QE)<br>(QE-QED)   |               | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0.266 – 2.1 $\mu\text{m}$  |                              |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)  | 1             | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$ , 10,6 $\mu\text{m}$<br>0,308 à 2,1 $\mu\text{m}$  |                              |
| Sensibilité typique  | 2, 9          | 3 V/J   |                              |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 3$ %   |                              |
| Répétabilité   |               | < 0,5 %   |                              |
| Énergie d'impulsion max. 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11      | 15 J<br>12,5 J<br>85 J<br>22 J  |                              |
| Bruit équivalent en énergie (NEE)<br>(Typique)   | 2, 9          | 10 $\mu\text{J}$  |                              |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9       | 500 Hz  | 200 Hz                       |
| Temps de montée typique<br>(0 à 100 %)   | 2, 9          | 300 $\mu\text{s}$   | 900 $\mu\text{s}$            |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 8, 9       | 225 $\mu\text{s}$   | 675 $\mu\text{s}$            |
| Densité d'énergie maximale   | 10            | 600 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>500 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz  |                              |
| Densité d'énergie maximale avec QED  |               | 16 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 1 impulsion<br>8 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>6 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>1 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |                              |
| Puissance moyenne max.<br>DéTECTEUR SEUL (QE50xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50xP-H-MB) :                            | 11            | 10 W (25 W avec QED)<br>20 W (45 W avec QED)  |                              |
| Densité de puissance max.<br>DéTECTEUR SEUL (QE50xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50xP-H-MB) :<br>Avec QED :           |               | 10 W/cm <sup>2</sup> à 10 W<br>5 W/cm <sup>2</sup> à 20 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>  |                              |
| Dimensions (H x L x P)<br>DéTECTEUR SEUL (QE50xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50xP-H-MB) :                            |               | 75 x 75 x 15 mm<br>75 x 75 x 44 mm  |                              |
| Poids<br>DéTECTEUR SEUL (QE50xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50xP-H-MB) :   |               | 209 g<br>338 g  |                              |
| Taille de l'ouverture<br>QE 50 :<br>QED 50 :   |               | 50 x 50 mm<br>47 x 47 mm  |                              |
| Superficie de l'ouverture<br>QE 50 :<br>QED 50 :   |               | 25 cm <sup>2</sup><br>22,09 cm <sup>2</sup>   |                              |
|  | Remarques     | Modèle  |                              |
|  |               | QE65LP-S-MB<br>QE65LP-H-MB  | QE65ELP-S-MB<br>QE65ELP-H-MB |

| Absorbeur optique                   |   | MB   |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Gamme spectrale                     | (QE)<br>(QE-QED)  | 0,19 – 20 $\mu\text{m}$<br>0,266 – 2,1 $\mu\text{m}$ |   |
| Gamme spectrale étalonnée           | (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)   | 1  | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$ , 10,6 $\mu\text{m}$<br>0,308 à 2,1 $\mu\text{m}$  |
| Sensibilité typique                 |   | 2, 9   | 4 V/J   1,5 V/J   |
| Incertitude d'étalonnage            |   | 2, 5, 6,<br>7, 9                                     | $\pm 3\%$   |
| Répétabilité                        |   |  | < 0,5 %   |
| Énergie d'impulsion max.            | 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3,<br>11  | 25 J   50 J<br>20 J   (une impulsion, $\mu\text{s}$ )<br>125 J   200 J<br>35 J   (une impulsion, $\mu\text{s}$ )  |
| Bruit équivalent en énergie (NEE)   | (Typique)   | 2, 9   | 10 $\mu\text{J}$   20 $\mu\text{J}$   |
| Taux Répétition max.                |   | 2, 4, 9  | 100 Hz   20 Hz  |
| Temps de montée typique (0 à 100 %) |   | 2, 9   | 1 000 $\mu\text{s}$   6 000 $\mu\text{s}$   |
| Largeur d'impulsion max. (typique)  |   | 2, 8, 9  | 700 $\mu\text{s}$   5 000 $\mu\text{s}$   |
| Densité d'énergie maximale          |   | 10   | 1 200 mJ/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 150 $\mu\text{s}$ , 10 Hz<br>600 mJ/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>500 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz  |
| Densité d'énergie maximale avec QED |   |  | 14 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 150 $\mu\text{s}$ , 10 Hz<br>16 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 1 impulsion<br>8 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>6 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>1 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |
| Puissance moyenne max.              | Détecteur seul (QE65xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE65xP-H-MB) :                             | 11   | 12 W (30 W avec QED)<br>40 W (90 W avec QED)  |
| Densité de puissance max.           | Détecteur seul (QE65xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE65xP-H-MB) :<br>Avec QED :               |  | 10 W/cm <sup>2</sup> à 12 W<br>5 W/cm <sup>2</sup> à 40 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>  |
| Dimensions (H x L x P)              | Détecteur seul (QE65xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE65xP-H-MB) :                             |  | 90 x 90 x 20 mm<br>90 x 90 x 94 mm  |
| Poids                               | Détecteur seul (QE65xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE65xP-H-MB) :                             |  | 440 g<br>900 g  |
| Taille de l'ouverture               | QE 65 :<br>QED 65 :   |  | 65 x 65 mm<br>62 x 62 mm  |
| Superficie de l'ouverture           | QE 65 :<br>QED 65 :   |  | 42 cm <sup>2</sup><br>38 cm <sup>2</sup>  |

| Absorbeur optique | Remarques | Modèle                     |                              |
|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|
|                   |           | QE95LP-S-MB<br>QE95LP-H-MB | QE95ELP-S-MB<br>QE95ELP-H-MB |
|                   |           | MB                         |                              |

|   |   |                  |   |
|---|---|------------------|---|
| Gamme spectrale                             | (QE)<br>(QE-QED)  |                  | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0.266 – 2.1 $\mu\text{m}$  |
| Gamme spectrale étalonnée                   | (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)   | 1                | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$ , 10,6 $\mu\text{m}$<br>0,308 à 2,1 $\mu\text{m}$  |
| Sensibilité typique                         |   | 2, 9             | 2 V/J      0,6 V/J  |
| Incertitude d'étalonnage                    |   | 2, 5, 6,<br>7, 9 | $\pm 3\%$   |
| Répétabilité                                |   |                  | < 0,5 %   |
| Énergie d'impulsion max.                    | 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11         | 35 J<br>30 J<br>150 J<br>50 J<br>70 J<br>(1 impulsion, $\mu\text{s}$ )<br>250 J<br>(1 impulsion, $\mu\text{s}$ )  |
| Bruit équivalent en énergie (NEE) (Typique) |   | 2, 9             | 15 $\mu\text{J}$ 30 $\mu\text{J}$   |
| Taux Répétition max.                        |   | 2, 4, 9          | 40 Hz      10 Hz  |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)         |   | 2, 9             | 2 000 $\mu\text{s}$ 6 000 $\mu\text{s}$   |
| Largeur d'impulsion max. (typique)          |   | 2, 8, 9          | 1 500 $\mu\text{s}$ 5 000 $\mu\text{s}$   |
| Densité d'énergie maximale                  |   | 10               | 1 200 mJ/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 150 $\mu\text{s}$ ,<br>10 Hz<br>600 mJ/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>500 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz   |
| Densité d'énergie maximale avec QED         |   |                  | 14 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 150 $\mu\text{s}$ , 10 Hz<br>16 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 1 impulsion<br>8 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>6 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>1 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |
| Puissance moyenne max.                      | Détecteur seul (QE95xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE95xP-H-MB) :                             | 11               | 20 W (45 W avec QED)<br>40 W (90 W avec QED)  |
| Densité de puissance max.                   | Détecteur seul (QE95xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE95xP-H-MB) :<br>Avec QED :               |                  | 10 W/cm <sup>2</sup> à 12 W<br>5 W/cm <sup>2</sup> à 40 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>  |
| Dimensions (H x L x P)                      | Détecteur seul (QE95xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE95xP-H-MB) :                             |                  | 122 x 122 x 20 mm<br>122 x 122 x 98 mm  |
| Poids                                       | Détecteur seul (QE95xP-S-MB) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE95xP-H-MB) :                             |                  | 780 g<br>1200 g   |
| Taille de l'ouverture                       | QE 95 :<br>QED 95 :   |                  | Diamètre de 95 mm<br>Diamètre de 90 mm  |
| Superficie de l'ouverture                   | QE 95 :<br>QED 95 :   |                  | 71 cm <sup>2</sup><br>64 cm <sup>2</sup>  |

### 1.4.2 Spécifications de la série MT

|  | Remarques         | Modèle  |
|--|-------------------|---|
|  |                   | QE4 MT  |
| Absorbeur optique  |                   | MT  |
| Gamme spectrale  | 12                | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$   |
| Gamme spectrale étalonnée  | 1                 | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$   |
| Sensibilité typique  | 2, 9              | 200 V/J   |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6, 7, 9, 13 | $\pm 4\%$   |
| Répétabilité   |                   | < 0,5 %   |
| Énergie d'impulsion max.<br>1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11          | 43 mJ<br>7,6 mJ   |
| Bruit équivalent en énergie (NEE)<br>(Typique)                         | 2, 9              | 1 $\mu\text{J}$   |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9           | MAESTRO, S-LINK, U-LINK: 6 000 Hz<br>INTEGRA : 5 200 Hz<br>M-LINK : 1 000 Hz <sup>14,15</sup>             |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)                                    | 2, 9              | 20 $\mu\text{s}$  |
| Largeur d'impulsion max. (typique)                                     | 2, 5, 8, 9        | 10 $\mu\text{s}$  |
| Densité d'énergie maximale   | 10                | 400 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |
| Puissance moyenne max.   |                   | 0,3 W   |
| Dimensions (H x L x P)   | 11                | 20 x 17,5 x 30 mm   |
| Poids  |                   | 20 g  |
| Taille de l'ouverture  |                   | Diamètre de 3,7 mm  |
| Superficie de l'ouverture :  |                   | 0,108 cm <sup>2</sup>   |

|  | Remarques     | Modèle  |             |
|--|---------------|---|-------------|
|  |               | QE12SP-S-MT   | QE12SP-H-MT |
| Absorbeur optique  |               | MT  |             |
| Gamme spectrale (QE)<br>(QE-QED)   | 12            | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0,266 – 2,1 $\mu\text{m}$  |             |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)  | 1             | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$<br>0,532 or 1,064 $\mu\text{m}$  |             |
| Sensibilité typique  | 2, 9          | 100 V/J   |             |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 3\%$   |             |
| Répétabilité   |               | < 0,5 %   |             |
| Énergie d'impulsion max. 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11      | 0,70 J<br>0,10 J<br>1,6 J<br>0,25 J   |             |
| Bruit équivalent en énergie (NEE) (Typique)  | 2, 9          | 0,8 $\mu\text{J}$   |             |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9       | MAESTRO, S-LINK, U-LINK: 6 000 Hz<br>INTEGRA : 5 200 Hz<br>M-LINK : 1 000 Hz <sup>14,15</sup>   |             |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)  | 2, 9          | 20 $\mu\text{s}$  |             |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 5, 8, 9    | 10 $\mu\text{s}$  |             |
| Densité d'énergie maximale   | 10            | 500 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz  |             |
| Densité d'énergie maximale avec QED  |               | 4 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, une impulsion<br>2 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>0,35 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>0,3 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |             |
| Puissance moyenne max.<br>DéTECTEUR SEUL (QE12SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12SP-H-MT) :                            | 11            | 3 W (7,5 W avec QED)<br>5 W (12,5 W avec QED)   |             |
| Densité de puissance max.<br>DéTECTEUR SEUL (QE12SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12SP-H-MT) :<br>Avec QED :           |               | 10 W/cm <sup>2</sup> à 3 W<br>10 W/cm <sup>2</sup> à 5 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>   |             |
| Dimensions (H x L x P)<br>DéTECTEUR SEUL (QE12SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12SP-H-MT) :                            |               | 36 x 36 x 14 mm<br>36 x 36 x 33 mm  |             |
| Poids<br>DéTECTEUR SEUL (QE12SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE12SP-H-MT) :   |               | 87 g<br>117 g   |             |
| Taille de l'ouverture<br>QE 12 :<br>QED 12 :   |               | 12 x 12 mm<br>9 x 9 mm  |             |
| Superficie de l'ouverture<br>QE 12 :<br>QED 12 :   |               | 1,4 cm <sup>2</sup><br>0,81 cm <sup>2</sup>   |             |

|  | Remarques     | Modèle  |             |
|--|---------------|---|-------------|
|  |               | QE25SP-S-MT   | QE25SP-H-MT |
| Absorbeur optique  |               | MT  |             |
| Gamme spectrale (QE)<br>(QE-QED)   | 12            | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0.266 – 2.1 $\mu\text{m}$  |             |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)  | 1             | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$<br>0,308 à 2,1 $\mu\text{m}$   |             |
| Sensibilité typique  | 2, 9          | 20 V/J  |             |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 3\%$   |             |
| Répétabilité   |               | < 0,5 %   |             |
| Énergie d'impulsion max. 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>Avec QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11      | 3,0 J<br>0,44 J<br>10 J<br>1,45 J   |             |
| Bruit équivalent en énergie (NEE) (Typique)  | 2, 9          | 2 $\mu\text{J}$   |             |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9       | MAESTRO, S-LINK, U-LINK: 6 000 Hz<br>INTEGRA : 5 200 Hz<br>M-LINK : 1 000 Hz <sup>14,15</sup>   |             |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)  | 2, 9          | 20 $\mu\text{s}$  |             |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 5, 8, 9    | 10 $\mu\text{s}$  |             |
| Densité d'énergie maximale   | 10            | 500 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz  |             |
| Densité d'énergie maximale avec QED  |               | 4 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, une impulsion<br>2 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>0,35 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>0,3 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |             |
| Puissance moyenne max.<br>Décteur seul (QE25SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25SP-H-MT) :                              | 11            | 5 W (15 W avec QED)<br>10 W (30 W avec QED)   |             |
| Densité de puissance max.<br>Décteur seul (QE25SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25SP-H-MT) :<br>Avec QED :             |               | 10 W/cm <sup>2</sup> à 5 W<br>10 W/cm <sup>2</sup> à 10 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>  |             |
| Dimensions (H x L x P)<br>Décteur seul (QE25SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25SP-H-MT) :                              |               | 50 x 50 x 14 mm<br>50 x 50 x 52,5 mm  |             |
| Poids<br>Décteur seul (QE25SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE25SP-H-MT) :   |               | 120 g<br>187 g  |             |
| Taille de l'ouverture<br>QE 25 :<br>QED 25 :   |               | 25 x 25 mm<br>22 x 22 mm  |             |
| Superficie de l'ouverture<br>QE 25 :<br>QED 25 :   |               | 6,25 cm <sup>2</sup><br>4,84 cm <sup>2</sup>  |             |

|  | Remarques     | Modèle  |
|--|---------------|---|
|  |               | QE50SP-S-MT<br>QE50SP-H-MT  |
| Absorbeur optique  |               | MT  |
| Gamme spectrale (QE)<br>(QE-QED)   | 12            | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$<br>0.266 – 2.1 $\mu\text{m}$  |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)<br>(QE-QED)  | 1             | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$<br>0,308 à 2,1 $\mu\text{m}$   |
| Sensibilité typique  | 2, 9          | 4 V/J   |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 3\%$   |
| Répétabilité   |               | < 0,5 %   |
| Énergie d'impulsion max. 1,064 $\mu\text{m}$<br>0,266 $\mu\text{m}$<br>et QED à 1,064 $\mu\text{m}$<br>QED à 0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11      | 13 J<br>1,8 J<br>44 J<br>6,5 J  |
| Bruit équivalent en énergie (NEE) (Typique)  | 2, 9          | 10 $\mu\text{J}$  |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9       | 4000 Hz   |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)  | 2, 9          | 20 $\mu\text{s}$  |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 5, 8, 9    | 10 $\mu\text{s}$  |
| Densité d'énergie maximale   | 10            | 500 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>70 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz  |
| Densité d'énergie maximale avec QED  |               | 4 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, une impulsion<br>2 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>0,35 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>0,3 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |
| Puissance moyenne max.<br>DéTECTEUR SEUL (QE50SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50SP-H-MT) :                          | 11            | 10 W (25 W avec QED)<br>20 W (45 W avec QED)  |
| Densité de puissance max.<br>DéTECTEUR SEUL (QE50SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50SP-H-MT) :<br>Avec QED :         |               | 10 W/cm <sup>2</sup> à 10 W<br>5 W/cm <sup>2</sup> à 20 W<br>600 W/cm <sup>2</sup>  |
| Dimensions (H x L x P)<br>DéTECTEUR SEUL (QE50SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50SP-H-MT) :                          |               | 75 x 75 x 15 mm<br>75 x 75 x 44 mm  |
| Poids<br>DéTECTEUR SEUL (QE50SP-S-MT) :<br>Avec dissipateur à ailettes (QE50SP-H-MT) :   |               | 209 g<br>338 g  |
| Taille de l'ouverture<br>QE 50 :<br>QED 50 :   |               | 50 x 50 mm<br>47 x 47 mm  |
| Superficie de l'ouverture<br>QE 50 :<br>QED 50 :   |               | 25 cm <sup>2</sup><br>22,09 cm <sup>2</sup>   |



### 1.4.3 Spécifications de la série QE8

|   | Remarques     | Modèle  |                            |
|---|---------------|---|----------------------------|
|   |               | QE8SP-B-MT-D0   | QE8SP-B-BL-D0/DA           |
| Absorbeur optique   |               | MT  | BL                         |
| Gamme spectrale   | 12            | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$                                   |                            |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)   | 1             | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$      |                            |
| Sensibilité typique   | 2, 9          | 2 400 V/J   | 900 V/J                    |
| Incertitude d'étalonnage  | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 4 \%$  |                            |
| Répétabilité  |               | < 0,5 %   |                            |
| Énergie d'impulsion max. à 1,064 $\mu\text{m}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• U-LINK et M-Link</li> <li>• S-Link-2</li> <li>• Maestro</li> </ul> | 2, 3, 11      | 1,3 mJ<br>1,1 mJ<br>0,93 mJ                               | 3,6 mJ<br>2,9 mJ<br>2,5 mJ |
| Bruit équivalent en énergie (NEE typique)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• M-Link</li> <li>• S-Link-2</li> <li>• U-LINK et Maestro</li> </ul>      | 2, 9          | 50 nJ<br>50 nJ<br>80 nJ                                   | 100 nJ<br>100 nJ<br>150 nJ |
| Taux Répétition max.  | 2, 4, 9       | 1 000 Hz  | 400 Hz                     |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)   | 2, 9          | 30 $\mu\text{s}$  | 30 $\mu\text{s}$           |
| Largeur d'impulsion max. (typique)  | 2, 5, 8, 9    | 10 $\mu\text{s}$  | 10 $\mu\text{s}$           |
| Densité d'énergie maximale  | 10            | 50 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz |                            |
| Densité de puissance moyenne max  |               | 1W/cm <sup>2</sup>  |                            |
| Puissance moyenne max.  | 11            | 0,5 W   |                            |
| Dimensions  |               | Ø38,1 x 27,4P mm  |                            |
| Poids   |               | 91 g  |                            |
| Taille de l'ouverture   |               | 7,8 x 7,8 mm  |                            |
| Superficie de l'ouverture   |               | 0,608 cm <sup>2</sup>                                     |                            |

#### 1.4.4 Spécifications pour les QE4-BL et XLE4

|  | Remarques     | Modèle   |
|--|---------------|--|
|  |               | QE4-BL   |
| Absorbeur optique  |               | BL   |
| Gamme spectrale  |               | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$  |
| Gamme spectrale étalonnée (QE)<br>(Optionnel)                              | 1             | 0,248 à 2,1 $\mu\text{m}$<br>2,1 à 2,5 $\mu\text{m}$   |
| Sensibilité typique  | 2, 9          | 150 V/J  |
| Incertitude d'étalonnage   | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 4\%$  |
| Répétabilité   |               | < 0,5 %  |
| Énergie d'impulsion max.<br>1,064 $\mu\text{m}$<br><br>0,266 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11      | 16 mJ<br>0,7 mJ  |
| Bruit équivalent en énergie (NEE)<br>(Typique)                             | 2, 9          | 1 $\mu\text{J}$ avec amplificateur<br>15 $\mu\text{J}$ avec moniteur                                     |
| Taux Répétition max.   | 2, 4, 9       | 1200 Hz  |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)  | 2, 9          | 200 $\mu\text{s}$  |
| Largeur d'impulsion max. (typique)   | 2, 5, 8, 9    | 100 $\mu\text{s}$  |
| Densité d'énergie maximale   | 10            | 150 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz<br>6 mJ/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |
| Puissance moyenne max.   |               | 0,3 W  |
| Dimensions (H x L x P)   |               | 20 x 17,5 x 30 mm  |
| Poids  |               | 20 g   |
| Taille de l'ouverture  |               | Diamètre de 3,7 mm   |
| Superficie de l'ouverture :  |               | 0,108 cm <sup>2</sup>  |

|   | Remarques     | Modèle   |
|---|---------------|--|
|   |               | XLE4   |
| Absorbeur optique                               |               | XT : Métallique  |
| Gamme spectrale                                 | 12            | 0,19 à 20 $\mu\text{m}$  |
| Gamme spectrale étalonnée                       | 1, 13         | 0,35 à 2,1 $\mu\text{m}$   |
| Sensibilité typique                             | 2, 9          | 1100 V/J   |
| Incertitude d'étalonnage                        | 2, 5, 6, 7, 9 | $\pm 4\%$ à 1 064 nm<br>$\pm 9\%$ pour les autres longueurs d'onde |
| Répétabilité                                    |               | < 0,5 %  |
| Énergie d'impulsion max.<br>1,064 $\mu\text{m}$ | 2, 3, 11      | 4 mJ   |
| Bruit équivalent en énergie (NEE)<br>(Typique)  | 2, 9          | 150 nJ   |
| Taux Répétition max.                            | 2, 4, 9       | 2 000 Hz   |
| Temps de montée typique (0 à 100 %)             | 2, 9          | 10 $\mu\text{s}$   |
| Largeur d'impulsion max. (typique)              | 2, 5, 8, 9    | 5 $\mu\text{s}$  |
| Densité d'énergie maximale                      | 10            | 90 mJ/cm <sup>2</sup> à 1,064 $\mu\text{m}$ , 7 ns, 10 Hz          |
| Puissance moyenne max.                          |               | 0,4 W  |
| Dimensions (H x L x P)                          |               | 26,5 x 36,0 mm (diamètre)  |
| Poids   |               | 130 g  |
| Taille de l'ouverture                           |               | Diamètre de 4,0 mm   |
| Superficie de l'ouverture :                     |               | 0,16 cm <sup>2</sup>   |

## ▼ 2 DIRECTIVES D'UTILISATION

### 2.1 Utilisation avec un moniteur compatible

Veillez consulter le guide du moniteur pour obtenir de plus amples renseignements.

#### 2.1.1 Directives générales

- 1- Installez le joulemètre sur son support.
- 2- Connectez le joulemètre au moniteur Gentec-EO (voir Fig. 2-1).

REMARQUE : Les paramètres programmés dans le DB-15 à « interface intelligente » sont valables pour une impédance de charge de 1 M $\Omega$  / 30 pF.

- 3- Retirez le couvercle protecteur du détecteur, s'il y a lieu.
- 4- Positionnez le joulemètre dans le parcours du faisceau laser (le faisceau laser doit être restreint à l'ouverture).

AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas les niveaux et les densités maximums d'énergie, de puissance crête et de puissance moyenne indiqués dans les pages de spécifications. L'utilisation d'une cible d'essai de dommage est fortement recommandée.

AVERTISSEMENT : 1- Aux puissances moyennes maximales, les boîtiers des joulemètres de la série QE peuvent atteindre 60 °C et présenter un danger de brûlure en cas de manipulation à mains nues.  
2- Une rétro réflexion diffuse de ~30 % est produite par l'absorbeur optique du joulemètre.

REMARQUE : Comme pour tous les appareils pyroélectriques à grande ouverture, ces détecteurs ont une certaine sensibilité à la position et à la taille du faisceau. Pour obtenir les mesures les plus précises, le faisceau devrait normalement être centré sur la surface du capteur et le diamètre du faisceau devrait idéalement être près du diamètre des conditions originales d'étalonnage, soit l'énergie encerclée à 100 % (d'un faisceau semi-gaussien arrêté à 1/e<sup>2</sup>) appliquée au à un diamètre équivalent à 80 % de l'ouverture du détecteur. L'utilisation d'un atténuateur/diffuseur QED<sup>6</sup>, d'une lentille divergente, d'un diffuseur de Lambert, ou tout autre procédé d'étalement de faisceau, est recommandée à cette fin. Veuillez noter que la totalité de la lumière laser doit être dirigée dans les limites de l'ouverture du détecteur et que la perte de transmission à travers le composant optique doit être connue.

---

<sup>6</sup> Consultez la section des accessoires en option.

### 2.1.2 Mesures à des longueurs d'onde autres que 1,064µm (à l'exception de l'atténuateur / diffuseur QED)

Le moniteur se configurera automatiquement à l'aide des données stockées dans la mémoire EEPROM de « l'interface intelligente » DB-15. Cette configuration comprend la sensibilité d'étalonnage et les corrections de longueurs d'onde pour 20 longueurs d'onde courantes<sup>7, 8</sup>.

Pour obtenir des mesures plus précises avec un joulemètre de la série QE à des longueurs d'onde autres que celles déjà corrigées par les données programmées Certificat de corrections personnalisées de la longueur d'onde <sup>7</sup> dans « l'interface intelligente », un facteur de correction<sup>8</sup> doit être paramétré dans le moniteur pour compenser le changement dans l'absorption de l'absorbeur optique à différentes longueurs d'onde.

Pour corriger le changement dans l'absorption, reportez-vous à la courbe spectrale du certificat Certificat de corrections personnalisées de la longueur d'onde fournie avec le joulemètre et calculez K en prenant la différence de pourcentage entre l'absorption à 1,064 µm et l'absorption à la longueur d'onde désirée.

$$K = \frac{A(\lambda_1)}{A(@1.064\mu m)}$$

Ici,  $A(\lambda_1)$  = absorption du QE à la longueur d'onde désirée.

$A(@1.064\mu m)$  = absorption du QE à 1,064 µm

Exemple de calcul :

$$A(\lambda_1) = 92 \%$$

$$A(@1.064\mu m) = 94 \%$$

$$K = \frac{A(\lambda_1)}{A(@1.064\mu m)} \times 100$$

$$K = \frac{92\%}{94\%} \times 100 = 0,9787 \times 100 = 97,87 \%$$

et correspond au paramètre du facteur de correction à entrer dans le moniteur<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Reportez-vous à la courbe spectrale du certificat Certificat de corrections personnalisées de la longueur d'onde fournie avec le joulemètre.

<sup>8</sup> Veuillez consulter le guide du moniteur pour obtenir les directives.

## **Mise en garde en cas d'utilisation des joulemètres de la série QE avec un atténuateur / diffuseur QED :**

### **2.1.3 Utilisation avec un atténuateur / diffuseur QED.**

- ÉTALONNAGE STANDARD
  - Détecteur QE seul : Étalonné, de 0,25 à 2,5  $\mu\text{m}$
  - Avec atténuateur QED : Non étalonné (étalonné par l'utilisateur, voir l'annexe A)
- ÉTALONNÉ COMME UNE PAIRE (EXTENSION -QED)
  - Détecteur QE seul : Non étalonné
  - Avec atténuateur QED : Étalonné, de 0,3 à 2,1  $\mu\text{m}$
- ÉTALONNAGE QED SUPPLÉMENTAIRE
  - Détecteur QE seul : Étalonné, de 0,25 à 2,5  $\mu\text{m}$
  - Avec atténuateur QED : Étalonné à une longueur d'onde (532 nm à 1 064 nm)

## **2.2 Lors de l'utilisation d'un oscilloscope :**

### **2.2.1 Directives générales**

- 1- Installez le joulemètre sur son support optique.
- 2- Connectez le joulemètre à l'oscilloscope.

REMARQUE : L'impédance de charge requise est 1 M $\Omega$  / 30 pF.

Lors de l'utilisation d'un oscilloscope, il peut être nécessaire d'employer l'adaptateur optionnel DB-15 à BNC. Le modèle C0 est connecté directement à l'oscilloscope.

- 3- Retirez le couvercle protecteur du détecteur, s'il y a lieu.
- 4- Positionnez le joulemètre dans le parcours du faisceau laser (le faisceau laser doit être restreint à l'ouverture).

AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas les niveaux et les densités maximums d'énergie, de puissance crête et de puissance moyenne indiqués dans les pages de spécifications. L'utilisation d'une cible d'essai de dommage est fortement recommandée.

AVERTISSEMENT : 1- Aux puissances moyennes maximales, les boîtiers des joulemètres de la série QE peuvent atteindre 60 °C et présenter un danger de brûlure en cas de manipulation à mains nues.  
2- Une rétrodiffusion diffuse de ~ 30 % est produite par l'absorbeur optique du joulemètre.

REMARQUE : Comme pour tous les appareils pyroélectriques à grande ouverture, ces détecteurs ont une certaine sensibilité à la position et à la taille du faisceau. Pour obtenir les mesures les plus précises, le faisceau devrait normalement être centré sur la surface du capteur et le diamètre du faisceau devrait idéalement être près du diamètre des conditions originales d'étalonnage, soit l'énergie encerclée à 100 % (d'un faisceau semi-gaussien arrêté à  $1/e^2$ ) appliquée au à un diamètre équivalent

à 80 % de l'ouverture du détecteur. L'utilisation d'un atténuateur/diffuseur QED<sup>9</sup>, d'une lentille divergente, d'un diffuseur Lambertien, ou tout autre procédé d'étalement de faisceau, est recommandée à cette fin. Veuillez noter que la totalité de la lumière laser doit être dirigée dans les limites de l'ouverture du détecteur et que la perte de transmission à travers le composant optique doit être connue.

- 5- Réglez l'oscilloscope pour déclencher l'impulsion du joulemètre ou le signal de synchronisation du laser.
- 6- Mesurez la tension de creux à crête générée par le joulemètre.
- 7- Relevez la sensibilité volt/joule du joulemètre indiquée sur le certificat d'étalonnage. Choisissez la valeur indiquée pour la longueur d'onde utilisée.
- 8- Calculez l'énergie optique au moyen de l'équation suivante :  

$$\text{Énergie} = V_{\text{crête}} / \text{Sensibilité d'étalonnage}$$
 Ex. :  
 -  $V_{\text{crête}} = 1$  volt  
 - Sensibilité d'étalonnage du détecteur (10 volts/joule)  

$$\text{Énergie} = 1 \text{ volt} / 10 \text{ V/J} = 100 \text{ mJ}$$

REMARQUE : Exclure tout décalage de C.C. de cette mesure de valeur crête d'impulsion; ce décalage est une fonction du taux de répétition.

## 2.2.2 Utilisation à des longueurs d'onde autres que 1,064 $\mu\text{m}$

Pour des mesures avec un joulemètre de la série QE, à des longueurs d'onde autres que 1,064  $\mu\text{m}$ , il faut déterminer un facteur de correction pour compenser le changement de la sensibilité du joulemètre causée par le changement dans l'absorption de l'absorbeur optique à différentes longueurs d'onde.

Pour corriger le changement dans l'absorption, reportez-vous à la courbe spectrale du certificat Certificat de corrections personnalisées de la longueur d'onde fournie avec le joulemètre et calculez K en prenant la différence de pourcentage entre l'absorption à 1,064  $\mu\text{m}$  et l'absorption à la longueur d'onde désirée.

$$K = \frac{A(\lambda_1)}{A(@1.064\mu\text{m})}$$

$$\text{Énergie} = V_{\text{crête}} / \text{Sensibilité d'étalonnage} / K$$

Ici  $A(\lambda_1)$  = absorption du QE à la longueur d'onde désirée.  
 $A(@1.064\mu\text{m})$  = absorption du QE à 1,064  $\mu\text{m}$

Exemple de calcul :

$$A(\lambda_1) = 92 \%$$

$$A(@1.064\mu\text{m}) = 94 \%$$

---

<sup>9</sup> Consultez la section des accessoires en option.

$$K = \frac{A(\lambda_1)}{A(@1.064\mu m)} \times 100$$

$$K = \frac{92\%}{94\%} \times 100 = 0,9787 \times 100 = 97,87 \%$$

Ex. :

- $V_{\text{crête}} = 1$  volt
- Sensibilité d'étalonnage du détecteur à  $1,064 \mu\text{m}$  (10 volts/joule)

$$\text{Énergie} = 1 \text{ volt} / 10 \text{ V/J} / 97,87 \% = 102,18 \text{ mJ}$$

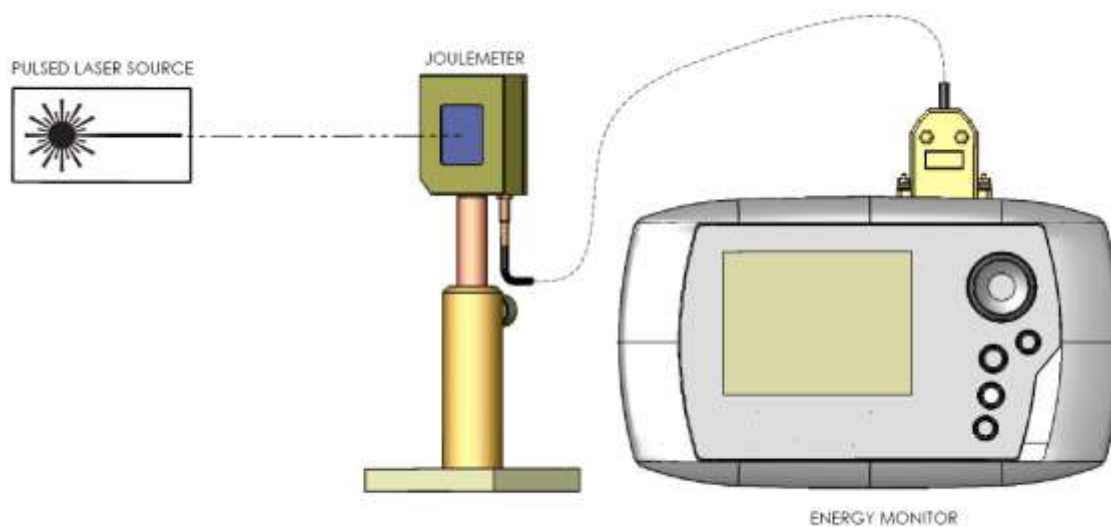


Fig. 2-1 Installation du joulemètre



### 3 DOMMAGES A L'ABSORBEUR OPTIQUE

En tout temps, la surface d'incidence du faisceau ne devrait pas être inférieure à 10 % de l'ouverture du détecteur. Veuillez communiquer avec Gentec-EO pour faire des mesures avec de tels faisceaux plus petits.

Les dommages sont habituellement causés par le non-respect de la valeur d'incidence maximale spécifiée par le fabricant :

- Densité de puissance moyenne
- Densité de puissance crête
- Densité d'énergie d'une impulsion

Reportez-vous aux pages de spécifications du joulemètre de la série QE. Des dommages peuvent également être attribuables à l'utilisation d'un détecteur ayant un absorbeur contaminé ou une surface d'atténuateur.

Les seuils de dommage mentionnés dans la section des spécifications se rapportent à une altération visible de la surface de l'absorbeur<sup>10</sup>. En pratique, une légère altération n'affectera pas la réponse du joulemètre. Considérez le joulemètre endommagé ou hors étalonnage lorsqu'un dommage important est évident ou que vous pouvez apercevoir l'électrode métallique sous le revêtement<sup>11</sup>.

Pour un atténuateur/diffuseur QED<sup>12</sup> installé sur un joulemètre de la série QE, considérez le détecteur endommagé ou hors étalonnage <sup>11</sup> :

- Composante optique avant érodée optiquement ou étincelle sur la composante avant, accompagnée d'un claquement sec : ce phénomène est associé à une densité d'énergie d'impulsion unique élevée et à une densité de puissance d'impulsion crête élevée.
- Composantes optiques fondues ou éclatées : ce phénomène est associé à une densité de puissance moyenne élevée.
- Absorbeur endommagé (voir ci-dessus).

Dans le cas d'un faisceau TEM<sub>00</sub> (gaussien), la puissance crête et la densité d'énergie maximales peuvent être calculées au moyen de l'équation suivante :

$$\text{Densité (puissance ou énergie)} \approx \frac{2I_0}{\pi W^2}$$

Où :  $I_0$  est la puissance ou l'énergie totale du faisceau

$W$  est le rayon du faisceau à  $1/e^2$  et  $\pi = 3,1416$

<sup>10</sup> Pour les détecteurs de la série QE, l'utilisation de la « cible d'essai de la série QE » appropriée est suggérée pour faire en sorte que le faisceau laser n'endommage pas le revêtement de l'absorbeur du détecteur; contactez Gentec-EO pour obtenir des directives supplémentaires.

<sup>11</sup> Contactez Gentec-EO pour obtenir une évaluation, une réparation, un réétalonnage ou un remplacement (reportez-vous aux directives relatives à la GARANTIE).

<sup>12</sup> Consultez la section des accessoires en option.

REMARQUE : La taille minimale d'un faisceau TEM<sub>00</sub> correspond au rayon d'un cercle centré sur l'axe du faisceau et renfermant 86 % de l'énergie du faisceau. Réf. : SIEGMAN, A.E., An Introduction to Lasers and Masers, p. 313 (Mcgraw-Hill Series in the Fundamentals of Electronic Science). (en anglais seulement)

Exemple de calcul de densité d'énergie :

$$I_0 = 1 \text{ joule (énergie totale)}$$

$$W = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Densité d'énergie} = \frac{2 \times 1 \text{ joule}}{\pi \times (1 \text{ cm})^2} = 0,64 \text{ joule/cm}^2$$

Exemple de calcul de densité de puissance :

$$I_0 = 1 \text{ mégawatt (puissance totale)}$$

$$W = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Densité de puissance} = \frac{2 \times 1 \text{ mégawatt}}{\pi \times (1 \text{ cm})^2} = 0,64 \text{ MW/cm}^2$$

## 4 ACCESSOIRES EN OPTION

### 4.1 Atténuateur / diffuseur QED

Les atténuateurs QED augmentent les capacités d'énergie, de densité d'énergie, de puissance moyenne et de densité de puissance moyenne de la série QE.

Ils sont conçus pour transmettre généralement 30 à 50 % du rayonnement incident au détecteur dans un patron Lambertien (patron de diffusion très large).

Ils sont faciles à installer et à enlever.

Les atténuateurs peuvent être facultativement étalonnés à 1,064  $\mu\text{m}$  lorsqu'ils sont achetés en même temps qu'un joulemètre QE correspondant.

Voir la figure 4-1 pour obtenir les spécifications :

|                                     |                     | Atténuateur   |                          |                |                |                  |
|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                     |                     | QED12   | QED25                    | QED50          | QED65          | QED95            |
| Gamme spectrale                     |                     | 0.266 to 2.5 $\mu\text{m}$  |                          |                |                |                  |
| Optional Calibration Spectral Range | Optical Absorber MB | 0.532 to 2.1 $\mu\text{m}$  | 0.3 to 2.1 $\mu\text{m}$ |                |                |                  |
|                                     | Optical Absorber MT |   |                          |                |                |                  |
| Réflectance typique                 |                     | 0.532 or 1.064 $\mu\text{m}$ <sup>13</sup>  | 0.3 to 2.1 $\mu\text{m}$ |                | NA             |                  |
| Densité d'énergie maximale          |                     | 16 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, une impulsion<br>8 J/cm <sup>2</sup> à 1 064 nm, 7 ns, 10 Hz<br>6 J/cm <sup>2</sup> à 532 nm, 7 ns, 10 Hz<br>1 J/cm <sup>2</sup> à 266 nm, 7 ns, 10 Hz |                          |                |                |                  |
| Dimensions (L x L x P, mm)          |                     | 30,5 x 41 x 12,5  | 44 x 55 x 12,5           | 69 x 80 x 12,5 | 85 x 97 x 12,5 | 115 x 127 x 12,5 |
| À utiliser avec                     |                     | QE12  | QE25                     | QE50           | QE65           | QE95             |

Fig. 4-1 Spécifications de l'atténuateur QED

### 4.2 Autres accessoires :

Communiquez avec Gentec-EO pour obtenir la liste complète des accessoires, ainsi que leurs spécifications et leurs caractéristiques.

Liste partielle :

- Adaptateur DB-15 à « interface intelligente » à BNC (pour connecter un appareil de la série QE à un oscilloscope);
- Moniteur Maestro;
- Malette de transport.

<sup>13</sup> Soit 1064 nm ou 532 nm (non pas la plage entre)

## 5 ANNEXE A

### 5.1 QED-12, QED-25, QED-50, QED-65, QED-95

#### Procédure d'étalonnage de l'atténuateur/diffuseur

Introduction :

Ces « atténuateurs/diffuseurs » doivent être étalonnés par l'utilisateur. La procédure d'étalonnage est relativement simple. Faites une première mesure sans l'atténuateur, puis la suivante avec l'atténuateur. Le rapport de ces mesures sera votre correction. Cette procédure peut être menée à toute longueur d'onde.

Lors de l'utilisation d'un oscilloscope :

Divisez la tension de sortie du joulemètre par la sensibilité d'étalonnage que nous avons fournie pour calculer la lecture de l'énergie (voir le guide du joulemètre).

Pour utiliser cette procédure à une longueur d'onde autre que celle mentionnée sur le certificat d'étalonnage, vous devez d'abord ajuster manuellement la valeur de sensibilité (du certificat d'étalonnage) avec le multiplicateur de correction de longueur d'onde inscrit sur le certificat *Données de correction personnalisée*. Utilisez cette sensibilité de longueur d'onde ajustée pour calculer les lectures d'énergie utilisées dans la procédure qui suit.

Lors de l'utilisation d'un moniteur de Gentec-EO :

Le paramètre *Attenuator* (Atténuateur) en mode *Measure* (Mesure) ne doit pas être coché. Vous devez accéder à cette fenêtre pour pouvoir entrer la longueur d'onde à laquelle vous étalonnez (voir le guide du moniteur). Le paramètre *Attenuator* (Atténuateur) doit également être désélectionné si vous effectuez un étalonnage à la même longueur d'onde que celle mentionnée sur le certificat d'étalonnage du joulemètre.

Procédure :

Étape 1 : Paramétrez le joulemètre pour mesurer l'énergie de votre laser pulsé. Si vous travaillez à une longueur d'onde autre que celle de la gamme spectrale étalonnée, ajustez la sensibilité de votre joulemètre en fonction de cette longueur d'onde, voir *Utilisation avec un oscilloscope ou Utilisation avec un moniteur*. Assurez-vous que le niveau d'énergie reste sous le seuil de dommage du détecteur, et que votre laser est suffisamment stable.

Étape 2 : Appliquez l'énergie durant quelques minutes pour réchauffer le détecteur. Ceci réduira le risque de variation thermique.

Étape 3 : Mesurez le niveau d'énergie sans l'atténuateur. Pour réduire les facteurs d'incertitude aléatoire, prenez la moyenne d'un nombre donné de lectures uniques. Nous recommandons de prendre au moins cent lectures uniques. Ceci devrait réduire le risque d'erreurs aléatoires par un facteur de 10. (Racine carré de « n », en tenant compte de la distribution Gaussienne).

Étape 4 : Installez l'atténuateur. Sans changer les réglages du laser, mesurez le niveau d'énergie, en prenant la moyenne du même nombre de lectures uniques. Tous les réglages du laser doivent être identiques à l'étape 3 (incluant la taille du faisceau et la position sur le détecteur).

Étape 5 : Répétez la première mesure (étape 3) afin de vous assurer que rien n'a changé durant la procédure pour invalider l'étalonnage. Un changement plus important que l'incertitude de vos mesures signifie que quelque chose a changé dans le laser ou dans l'environnement. Ajoutez cette donnée à l'incertitude ( $\pm$ ) lorsque vous utilisez l'atténuateur ou essayez de stabiliser le laser et l'environnement et reprendre à l'étape 3.

Le multiplicateur de correction du moniteur et d'un oscilloscope sera exprimé ainsi :

$$T_f = \frac{\text{Mesure sans atténuateur}}{\text{Mesure avec atténuateur}} \quad (\text{aucune unité})$$

À présent, utilisez ce facteur d'étalonnage dans le menu de correction de l'atténuateur/diffuseur lorsque vous l'utilisez à la longueur d'onde établie à l'étape 1.

## 6 ANNEXE B

### 6.1 Procédure de recyclage et de tri pour la directive WEEE 2002/96/CE

La présente section s'adresse au centre de recyclage au moment où le détecteur atteint la fin de sa vie utile. Le bris du sceau d'étalonnage ou l'ouverture du moniteur annulera la garantie du détecteur.

Le détecteur complet contient :

- 1 détecteur avec fils ou DB-15
- 1 guide d'utilisation
- 1 certificat d'étalonnage
- 1 PCB électronique (option Integra)
- 1 boîtier en plastique (option Integra)

### 6.2 Tri :

- Papier : guide et certificat
- Fils : détecteur de câble.
- Carte de circuit imprimé : à l'intérieur du détecteur (version -C0 seulement) ou DB-15, aucun tri nécessaire (moins de 10 cm<sup>2</sup>). À l'intérieur du boîtier de l'appareil Integra (aucun tri nécessaire, moins de 10 cm<sup>2</sup>)
- Aluminium : boîtier du détecteur.
- Plastique : boîtier de l'appareil Integra

## 7 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Application des directives du Conseil : 2014/30/EU Directive CEM



**Nom du fabricant :** Gentec Electro-Optics, Inc.  
**Adresse du fabricant :** 445, St-Jean-Baptiste, bureau 160  
 (Québec) Canada G2E 5N7

**Nom du représentant en Europe :** Laser Component S.A.S  
**Adresse du représentant :** 45 bis Route des Gardes  
 92190 Meudon (France)

**Typique d'équipement :** Détecteur d'énergie optique  
**Numéro du modèle :** Série QE  
**Année de test et de fabrication :** 2016

Normes auxquelles la conformité est déclarée :  
 EN 61326-1 : Norme générique d'émission 2006

| Norme                        | Description  | Critères de performance                      |
|------------------------------|--|--|
| CISPR 11:2009<br>A1:2010     | Équipement industriel, scientifique et médical – Caractéristiques de la perturbation des fréquences radio – Limites et méthodes de mesure  | Classe A                                     |
| EN 61000-4-2<br>2009         | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2 : Techniques de test et de mesure - Décharge électrostatique.   | Classe B                                     |
| EN61000-4-3<br>2006+A2:2010  | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3 : Techniques de test et de mesure - Test d'immunité au rayonnement, à la fréquence radio et au champ électromagnétique.   | Classe A                                     |
| EN61000-4-4 2012             | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4 : Techniques de test et de mesure - Test d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves / brefs parasites électriques temporaires.   | Classe B                                     |
| EN 61000-4-5 2006            | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5 : Techniques de test et de mesure - Test d'immunité aux surtensions.  | Classe B                                     |
| EN 61000-4-6 2013            | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6 : Techniques de test et de mesure - Immunité aux fréquences radio conductrices.   | Classe A                                     |
| EN 61000-4-11<br>2004        | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11 : Techniques de test et de mesure - Test d'immunité aux chutes de tension, aux courtes interruptions et aux variations de tension.<br>Creux de tension : 0 % pendant 1 cycle, 40 % pendant 10 cycles, 70 % pendant 25 cycles<br>Coupures brèves : 0 % pendant 250 cycles | Classe B<br>Classe B<br>Classe C<br>Classe C |
| N 61000-3-2:2006<br>+A1:2009 | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant d'entrée de l'équipement <= 16 A par phase)   | Classe A                                     |

**Je, soussigné, déclare que l'équipement indiqué ci-dessus est conforme aux Directives et aux Normes susmentionnées.**

**Lieu : Québec (Québec)**

**Date : 15 juillet 2016**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke ending in a sharp point.

(président)



# CHEF DE FILE EN MESURE LASER DEPUIS 1972



■ PUISSANCE ET ÉNERGIE LASER



■ PROFILOMÉTRIE LASER



■ MESUREURS THZ

## CANADA

445 St-Jean-Baptiste, Suite 160  
Quebec, QC, G2E 5N7  
CANADA

T (418) 651-8003  
F (418) 651-1174

[info@gentec-eo.com](mailto:info@gentec-eo.com)

## ÉTATS-UNIS

5825 Jean Road Center  
Lake Oswego, OR, 97035  
USA

T (503) 697-1870  
F (503) 697-0633

[info@gentec-eo.com](mailto:info@gentec-eo.com)

## JAPON

Office No. 101, EXL111 building,  
Takinogawa, Kita-ku, Tokyo  
114-0023, JAPAN

T +81-3-5972-1290  
F +81-3-5972-1291

[info@gentec-eo.com](mailto:info@gentec-eo.com)

## CENTRES DE CALIBRATION

- 445 St-Jean-Baptiste, Suite 160  
Quebec, QC, G2E 5N7, CANADA
- Werner von Siemens Str. 15  
82140 Olching, GERMANY
- Office No. 101, EXL111 building,  
Takinogawa, Kita-ku, Tokyo  
114-0023, JAPAN